



Ares

Improving sight

Per le persone che richiedono  
una zona lontana altamente  
confortevole, con una zona  
vicina personalizzabile.  
Progettato per una visione  
ampia: noi impostiamo la  
zona lontana, tu scegli la zona  
vicina.

**Ares**



**Noi  
impostiamo  
la zona  
lontana**

**tu scegli  
quella  
vicina**





# IPROF

**Zona lontano**  
Full

**Zona vicino**  
10 — 40 mm

**Inset**  
0 — 5 mm

**Addizione**  
0,10 to 5,00 dpt

**Lunghezza corridoio**  
5 — 13 mm mm

**Ottimizzazione atorico**  
Available

**Decentramento**  
0 — 5 mm

**Ast/Add Ratio(Add 2,00)**  
1,415

## Raccomandato a:

portatori di lenti progressive che trascorrono molto tempo alla guida, ideali per aggiunte elevate e per persone che necessitano di un'area di visione a grande distanza.

## Visione da lontano:

L'intera larghezza dell'area di visione da lontano e il basso rapporto astigmatismo / aggiunta consentono ai primi portatori di lenti progressive di utilizzare gli stessi occhiali per vedere ciò di cui hanno bisogno a qualsiasi distanza.

## Visione da vicino:

La larghezza regolabile dell'area di visione da vicino, compresa tra 10 e 40 mm, consente di essere personalizzata per i portatori che utilizzano la visione ravvicinata, senza cambiare gli occhiali.

## Comfort:

La chiarezza del design (con un'aggiunta massima di 2,00 diottrie), l'astigmatismo periferico basso ed uniforme (di conseguenza morbido corridoio) garantisce il massimo comfort ai primi portatori di lenti multifocali.

## Adattamento:

Facile adattamento per i portatori di lenti multifocali alle prime armi. La compensazione dei prismi verticali e orizzontali permette di utilizzare questa lente senza difficoltà nel trovare la giusta posizione.

## Cornice avvolgente:

L'intera larghezza dell'area di visione da lontano, combinata con la larghezza media dell'area di visione da vicino e la lunghezza media del corridoio, garantiscono ottime prestazioni sui telai wrap.

## Personalizzazione:

Massima personalizzazione disponibile grazie al passo intermedio di dimensione del corridoio di visione di 1 mm, inserto variabile, valore aggiuntivo personalizzato (da impostare esattamente, senza limitazioni allo step di 0,25 diottrie), inclinazione pantoscopica personalizzata e angoli di avvolgimento personalizzati.

## Montaggio

L'intera larghezza dell'area di visione da lontano e l'area di visione da vicino regolabile consentono a questo design di adattarsi a montature di qualsiasi dimensione. L'algoritmo di progettazione Opto + consente di riprodurre questo obiettivo su qualsiasi base dell'obiettivo anteriore (nessuna restrizione)



# IPROG

**Zona lontano**  
Full

**Zona vicino**  
10 — 40 mm

**Inset**  
0 — 5 mm

**Addizione**  
0,10 to 5,00 dpt

**Lunghezza corridoio**  
5 — 13 mm mm

**Ottimizzazione atorico**  
Available

**Decentramento**  
0 — 5 mm

**Ast/Add Ratio(Add 2,00)**  
1,415

## Raccomandato a:

Sviluppate per la guida e per le persone che necessitano di un'area di visione per lontano. Garantisce prestazioni eccellenti dell'area periferica della zona per lontano, consigliata a chi guida molto. Sconsigliata se l'addizione è troppo alta, creando disturbi nelle zone oblique.

## Visione da lontano:

L'intera larghezza dell'area di visione da lontano, l'area di visione delle tempie migliorata e il basso rapporto astigmatismo / aggiunta consentono ai primi portatori di lenti progressive di utilizzare gli stessi occhiali per vedere ciò di cui hanno bisogno a qualsiasi distanza.

## Visione da vicino:

La larghezza regolabile dell'area di visione da vicino, che va da 10 a 40 mm, consente di essere personalizzata per i portatori che desiderano utilizzare la visione ravvicinata, senza cambiare gli occhiali.

## Comfort:

La chiarezza del disegno (con un'aggiunta massima di 2,00 diottrie), l'astigmatismo periferico basso ed uniforme garantiscono il miglior comfort ai primi portatori di lenti multifocali.

## Adattamento:

Facile adattamento per i portatori di lenti multifocali alle prime armi. La compensazione dei prismi verticali e orizzontali permette di utilizzare questa lente senza difficoltà nel trovare la giusta posizione.

## Cornice avvolgente:


L'intera larghezza dell'area di visione da lontano, combinata con la larghezza media dell'area di visione da vicino e la lunghezza media del corridoio, garantiscono ottime prestazioni sui telai wrap.

## Personalizzazione:

Massima personalizzazione disponibile grazie al passo intermedio della dimensione del corridoio di visione di 1 mm, l'inserto variabile, il valore di addizione personalizzabile (da impostare esattamente, senza limitazioni allo step di 0,25 diottrie), l'inclinazione pantoscopica personalizzabile e gli angoli di avvolgimento personalizzabili.

## Montaggio

L'intera larghezza dell'area di visione da lontano e l'area di visione da vicino regolabile consentono a questo design di adattarsi a montature di qualsiasi dimensione. L'algoritmo di progettazione Opto + consente di riprodurre questo obiettivo su qualsiasi base dell'obiettivo anteriore (nessuna restrizione).

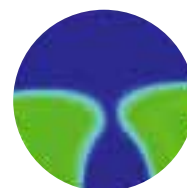

GENERATED FROM

**OPTO+ CALC**

natively  
**secure**  
natively  
**accessible**  
from anywhere  
natively  
**powerful**

